




The one that works.

Crystal Tip® – Disposable tips voor meerfunctiespuiten



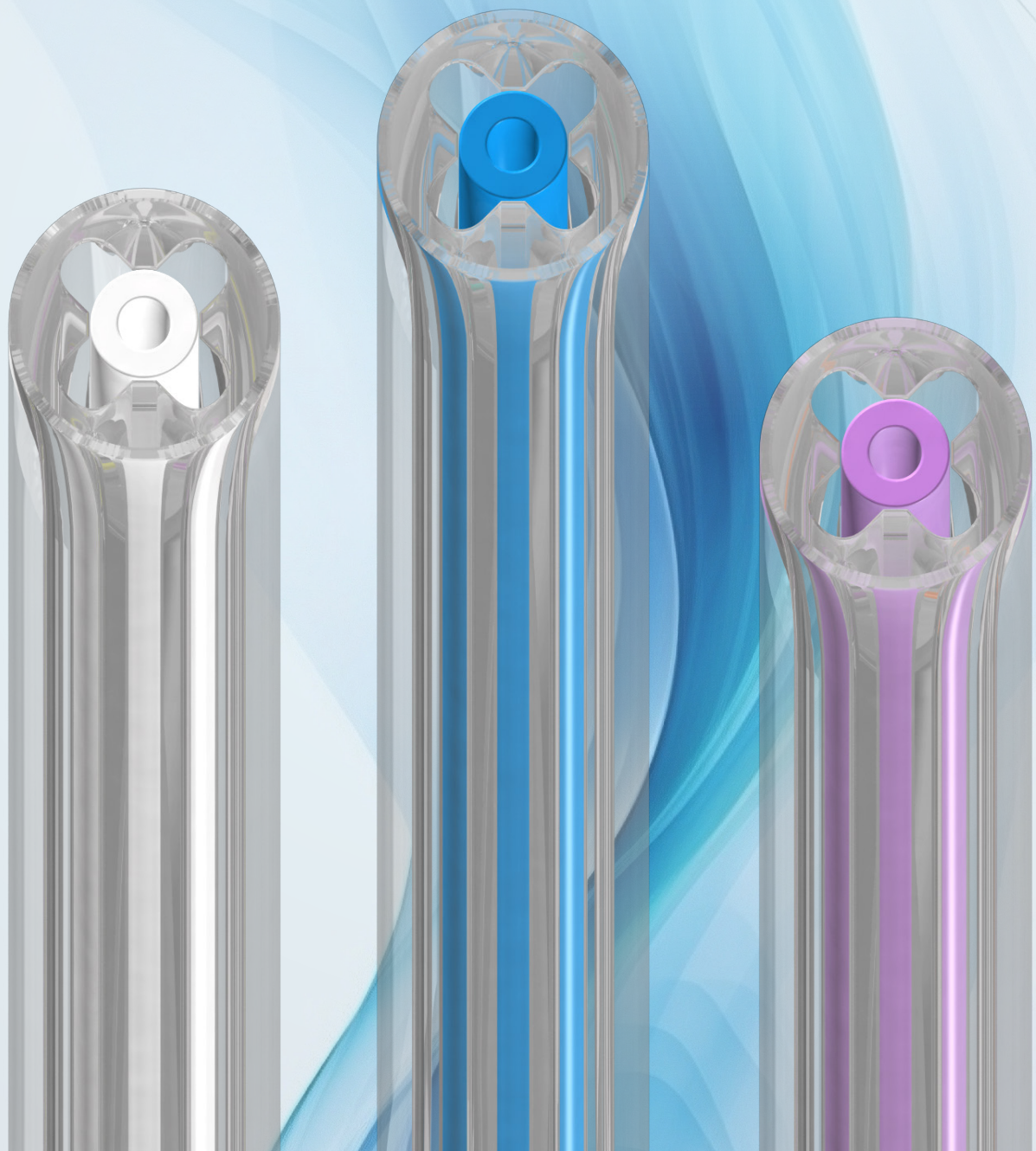

We helpen je om de juiste meerfunctiespuit correct te identificeren, sturen je een sample, geven je een vergelijking tussen Crystal Tip® en concurrerende producten* en leveren je de juiste conversie-kit (indien nodig) om de overstap zo soepel en gemakkelijk mogelijk voor je te maken.

*zie QR-code op de laatste pagina van deze flyer

 Conversieset Cefla Anthos F3/F6 QRNT1030	 Conversieset Cefla SP QRNT1035	 Conversieset Faro SM03 QRNT1100	 Conversieset Kavo Estetica QRNT1092
 Conversieset Kavo K4 QRNT1090	 Conversieset Luzzani Minibright QRNT1055	 Conversieset Luzzani Minilight QRNT1050	 Conversieset Luzzani Minimate QRNT1051
 Conversieset Quick Release ADEC/UNIC QRNT1000	 Conversieset Sirona Sprayvit 4000 QRNT1071	 Conversieset Sirona Sprayvit C8 QRNT1070	De artikelnummers hebben alleen betrekking op de StarzTipz® adapters

Hier vind je antwoorden op de meest gestelde vragen over Crystal Tip®. Ons doel is om je snel en duidelijk van alle belangrijke informatie te voorzien. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

01. Wat is het voordeel van de “Quad Air Core”-technologie?

De vier luchtkamers zorgen voor een gematigde druk en verstuiving. Dit maakt het opzetstuk bijzonder geschikt voor het drogen van bondings, enz. Het originele opzetstuk (Quad Air Core) maakt ook een goede toegang tot de achterste molaren mogelijk. Het langere opzetstuk (95 mm) kan worden gebogen voor buccale of linguale behandelingen die moeilijk bereikbaar zijn.

02. Wat is er speciaal aan het HP-opzetstuk?

Met een lengte van 65 mm en dubbele kamers biedt het High-Pressure (HP) opzetstuk een krachtiger, geconcentreerder spraybeeld en is het ideaal voor het reinigen en onderzoeken van diepe parodontale pockets. Het is 30 mm korter dan het originele opzetstuk en is ideaal voor gebruik bij jonge patienten en om dicht bij de plaats van behandeling te werken. De kortere tip is vergelijkbaar met die van conventionele hulpstukken die telkens met stoom gesteriliseerd moeten worden, waardoor het eenvoudiger is om over te stappen op hulpstukken voor eenmalig gebruik.

03. Werkt deze tip op mijn meerfunctiespuit?

We hebben een reeks adapters die op veel meerfunctiespuiten passen.


04. Kan ik er echt zeker van zijn dat Crystal Tip® een nauwkeurige scheiding van lucht en water garandeert?

Als je technische apparatuur volledig functioneert, garanderen we 100% scheiding van lucht en water en zit de Crystal Tip® opzetstuk stevig op de meerfunctiespuit dankzij de O-ringvergrendeling. Bovendien kun je dankzij de transparante buitenschacht van de Crystal Tip® gemakkelijk zien of er water in de luchtkamer terecht is gekomen. Lekkageproblemen zijn voor 99% te wijten aan versleten O-ringen, onjuiste montage van het hulpstuk of gebruik van het hulpstuk met een niet-compatibele adapter.



Crystal Tip® basisfuncties

- Eenmalig gebruik voorkomt kruisbesmetting
- Direct droge lucht en lekt niet
- Slank en ergonomisch ontwerp biedt beter zicht in de mondholte
- O-ring groef voorkomt mogelijke lucht-water verontreiniging in de luchtkanalen
- Eenvoudige installatie
- Kan in vorm worden gebogen zonder de lucht-/waterstroom te beïnvloeden en is lekvrij
- Grote selectie adapters voor de meeste MF spuiten
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren
- FDA goedgekeurd

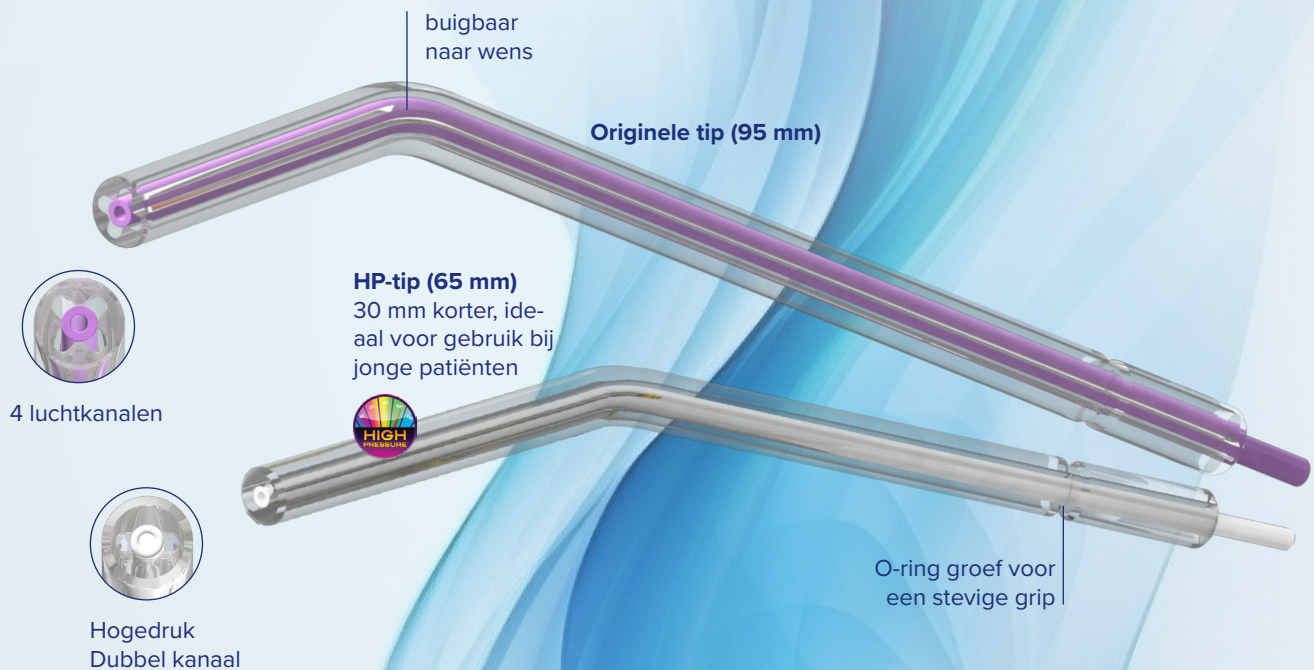

← Stap nu over op
Crystal Tip®!

Overschakelen op Crystal Tip® is eenvoudiger dan je denkt!

Selecteer het model van je lucht/water spuit en vind de juiste adapter voor jou en de bijbehorende O-ring kit om je meelfunctiespuit om te bouwen naar Crystal Tip®.

YIE-NL-CT/0725