




The one that works.

Crystal Tip® – Engångsspetsar för luft/vatten-sprutor

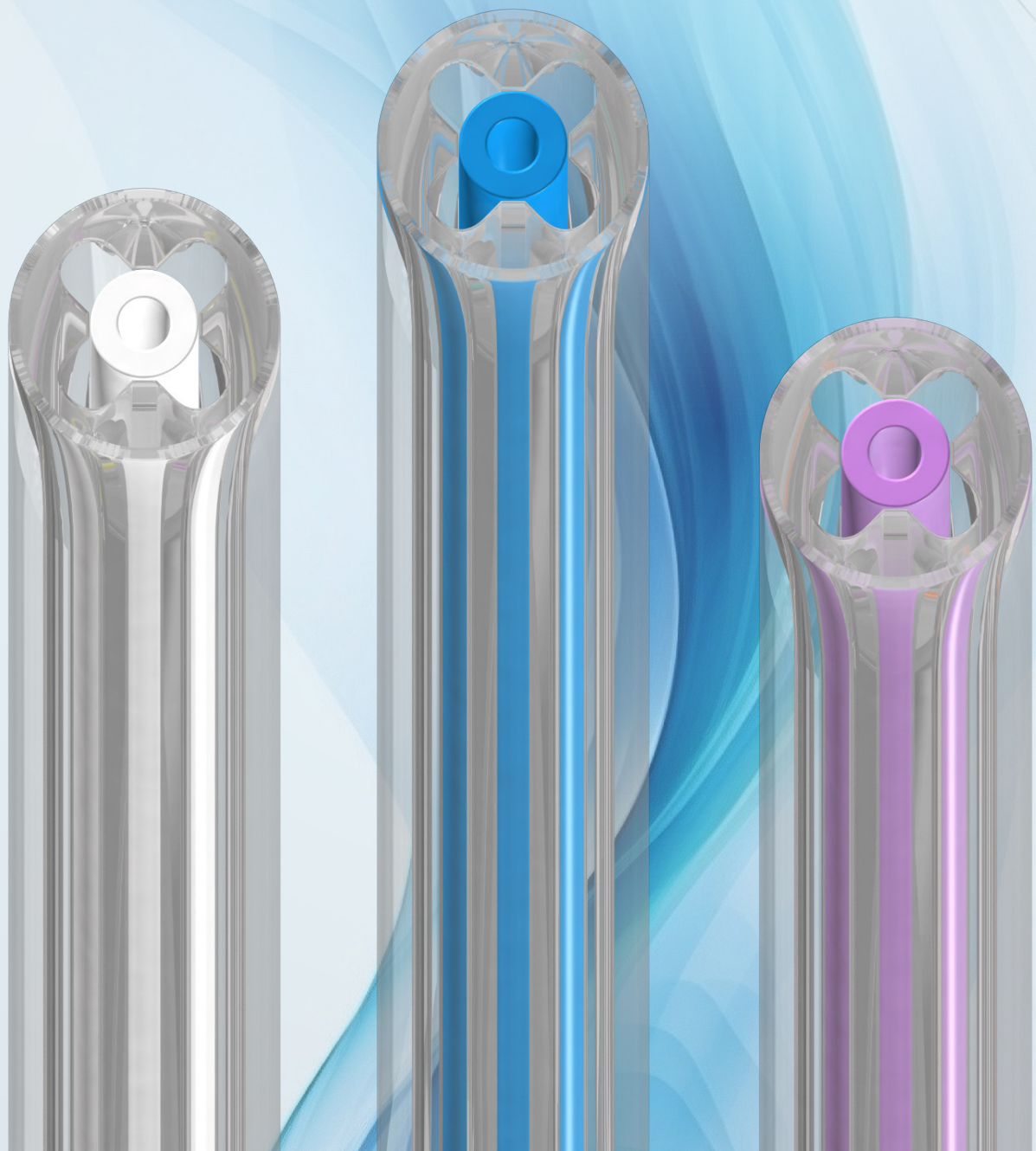

Adapter för spruta



Vi hjälper dig att välja rätt spruta, skickar ett prov, gör en jämförelse mellan Starz Tipz® och konkurrerande produkter* åt dig och förser dig med lämpligt konverteringskit (om det behövs) på för att göra övergången så smidig och enkel som möjligt för dig.

*se QR-kod p. sista sidan av denna flyer

Konverteringssats Cefla Anthos F3/F6 QRNT1030	Konverteringssats Cefla SP QRNT1035	Konverteringssats Faro SM03 QRNT1100	Konverteringssats Kavo Estetica QRNT1092
Konverteringssats Kavo K4 QRNT1090	Konverteringssats Luzzani Minibright QRNT1055	Konverteringssats Luzzani Minilight QRNT1050	Konverteringssats Luzzani Minimate QRNT1051
			Artikelnumren hänvisar endast till Crystal Tip®-adapterar
Konverteringssats Quick Release ADEC/UNIC QRNT1000	Konverteringssats Sirona Sprayvit 4000 QRNT1071	Konverteringssats Sirona Sprayvit C8 QRNT1070	



Vanliga Frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Crystal Tip®. Vårt mål är att ge dig all viktig information på snabbt och tydligt. Om du har några ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss personligen på.

01. Vad är fördelen med ”Quad Air Core”-tekniken?

De fyra luftkammarna garanterar ett måttligt tryck och finfördelning. Detta gör tillbehöret särskilt lämpligt för torkning av lim, tätningsmedel och andra material. De ursprungliga attachmenten (Quad Air Core) Möjliggör också god åtkomst i området för posteriora molarer. Den längre engångskanylen spetsen (95 mm) kan böjas för svåråtkomliga buckala eller linguala behandlingar .

02. Vad är det som är speciellt Med HP-tillsatsen?

Med en längd på 65 mm och dubbla kammare ger HP-försatsen ett kraftfullare och mer fokuserat spraymönster och är perfekt för rengöring och undersökning av djupa parodontala fickor. Den är 30 mm kortare än originaltillsatsen och är idealisk för användning på unga patienter och för arbete nära behandlingsstället. Den kortare längden är densamma som för konventionella ångsteriliserbara tillbehör, vilket gör det enklare att byta till engångsfäste.

03. Kommer denna spets att fungera på min spruta?

Vi har en rad olika omvandlare som passar många olika sprutor.


04. Kan jag verkligen vara säker på att Crystal Tip® garanterar en exakt separation av luft och vatten?

Om din tekniska utrustning är fullt fungerande garanterar vi 100% separation av luft och vatten. Tack vare O-ringslåset sitter Crystal Tip®-fästet stadigt på sprutan. Tack vare det genomskinliga yttre skaftet på Crystal Tip® kan du dessutom enkelt se om vatten har trängt in i luftkammaren. Läckageproblem beror 99 % på slitna O-ringar, felaktig montering av tillbehöret eller att tillbehöret används med en adapter som inte är kompatibel med.



Crystal Tip® grundläggande funktioner

- Engångsbruk förhindrar korskontaminering
- Omedelbar torr luft och inga läckor
- Smal och ergonomisk design ger bättre synlighet i munhålan
- O-ringsspår förhindrar eventuell kontaminering av vatten i luftkanalerna
- Enkel installation
- Kan böjas i form utan att påverka luft-/vattenflödet på och är läckagefritt på
- Stort urval av omvandlare för de flesta sprutor
- Finns i flera olika färger
- FDA-godkänd

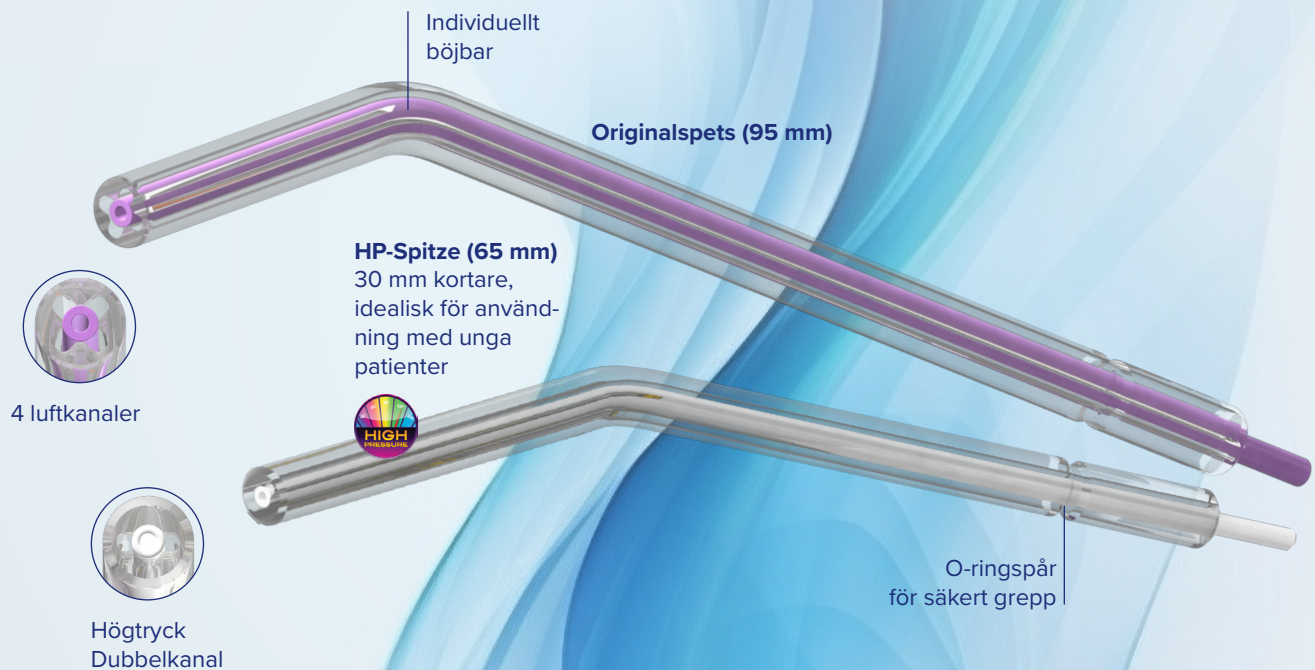

↖ *Börja byta till
Crystal Tip® nu!*

Att byta till Crystal Tip® är enklare än du tror!

Välj modell på din luft/vatten-spruta och hitta rätt adapter för dig och motsvarande O-ringssats för att konvertera ditt sprutsystem till Crystal Tip®.

YIE-SE-CT/0725